

Easywrap®

Helpoksi tehty kompressio

- Helppo pukea
- Turvallinen, tasainen painepuristus
- Miellyttävä käyttää

Helppoa kuin 1, 2, 3

easywrap®

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2015 ISO 14001:2015



Yksinkertainen ja tehokas vaihtoehto kompressiosidoksille ja -sukille

Helppokäyttöinen ja turvallinen kompressio

Easywrap, velcro-tarrakiinnitteinen kompressiotekstiili, koostuu limittäin kiinnitettävistä paneeleista. Sen alla käytetään suojaavaa, antibiokrobista alussukkaa. Easywrap-tekstiili on yksinkertainen ja nopea pukea sekä sen säätäminen on helppoa velcro-kiinnityksen ansiosta.

Easywrapin ainutlaatuinen kudottu materiaali takaa sen, ettei se rypyynty tai rullaannu, jolloin se takaa tasaisen, varman kompression. Easywrap on suunniteltu matalan profiilin kompressiosidoksesi, jolloin se on lähes huomaamaton käytettäessä vaatetuksen alla.




Patentoitu kolmipaneelinen polviosa

Helposti puettavan reisi-polvitekstiilin v-leikkaukset mahdollistavat hyvän istuvuuden polven alueella. Ellipsin muotoinen leikkaus ja pehmeä aluslevy lisäävät käyttömukavuutta ja estävät tekstiiliä painamasta polven takaosaa.



1. ASETTAMINEN

Aseta sidoksen paneelit 50-prosenttisesti päällekkäin ja kierrä raajan ympärille.

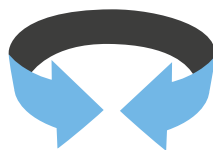

2. VENYTYS

Venytä kevyesti sidoksen paneelia raajan ympärillä, kunnes tunnet materiaalin ”lukittuvan”.



3. KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä paneelin velcrotarra.

Ainutlaatuinen Easywrap-tekstiili takaa oikean kopression, joka yhdistettynä aktiiviseen liikkumiseen, tehostaa turvotuksen laskemista. Kun aktiivitaso laskee, Easywrap säilyttää oikean painepuristuksen, jatkaen turvotuksen laskemista.



Tee kompressio kohdennetusti tai laaja-alaisesti

Easywrap-kompressiosidoksia voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Alaraajan kompressio-tekstiileillä voidaan turvotusta hoitaa jalkapöydästä reiteen asti ja yläraajan tekstiileillä kädestä käsivarren yläosaan saakka. Käsivarsiosan hiha ei estä käden taipuvuutta.

Mekaanisesti rajoitettu venyvyys tekee Easywrap-sidoksen asentamisen sopivalle kireydelle helpoksi, jolloin voit olla varma oikeasta kompressionmäärästä.



Easywrap jalkaosa HIEKKA

Koko	TUOTENUMEROT				MITAT		
	LIGHT		STRONG		a ¹ ympärysmitta	a jalkapohjan pituus	
	Normaali	Pitkä	Normaali	Pitkä		Normaali	Pitkä
XS	ELFR1	ELFL1	ESFR1*	ESFL1*	22-24	14,5-16,5	16,5-18,5
S	ELFR2	ELFL2	ESFR2*	ESFL2*	25-27	16-18	18-20
M	ELFR3	ELFL3	ESFR3*	ESFL3*	28-30	17,5-19,5	19,5-21,5
L	ELFR4	ELFL4	ESFR4*	ESFL4*	31-34	19-21	21-23
XL	ELFR5	ELFL5*	ESFR5*	ESFL5*	35-40	21-23	23-25

Easywrap jalkaosa MUSTA

Koko	TUOTENUMEROT				MITAT		
	LIGHT		STRONG		a ¹ ympärysmitta	a jalkapohjan pituus	
	Normaali	Pitkä	Normaali	Pitkä		Normaali	Pitkä
XS	ELBFR1	ELBFL1*	ESBFR1*	ESBFL1*	22-24	14,5-16,5	16,5-18,5
S	ELBFR2	ELBFL2*	ESBFR2*	ESBFL2*	25-27	16-18	18-20
M	ELBFR3	ELBFL3*	ESBFR3*	ESBFL3*	28-30	17,5-19,5	19,5-21,5
L	ELBFR4*	ELBFL4*	ESBFR4*	ESBFL4*	31-34	19-21	21-23
XL	ELBFR5*	ELBFL5*	ESBFR5*	ESBFL5*	35-40	21-23	23-25

Easywrap sääriosa HIEKKA


Koko	TUOTENUMEROT				MITAT			
	LIGHT		STRONG		c ympärysmitta	b ympärysmitta	b-d välinen pituus	
	Normaali	Pitkä	Normaali	Pitkä			Normaali	Pitkä
XS	ELLR1	ELLT1*	ESLR1*	ESLT1*	38-45	23-27	30-34	34-38
S	ELLR2	ELLT2	ESLR2*	ESLT2*	44-52	28-32		
M	ELLR3	ELLT3	ESLR3*	ESLT3*	50-60	33-38		
L	ELLR4	ELLT4*	ESLR4*	ESLT4*	55-65	39-44		
XL	ELLR5*	ELLT5*	ESLR5*	ESLT5*	60-70	45-52		

Easywrap sääriosa MUSTA

Koko	TUOTENUMEROT				MITAT			
	LIGHT		STRONG		c ympärysmitta	b ympärysmitta	b-d välinen pituus	
	Normaali	Pitkä	Normaali	Pitkä			Normaali	Pitkä
XS	ELBLR1	ELBLT1*	ESBLR1*	ESBLT1*	38-45	23-27	30-34	34-38
S	ELBLR2	ELBLT2*	ESBLR2*	ESBLT2*	44-52	28-32		
M	ELBLR3	ELBLT3*	ESBLR3*	ESBLT3*	50-60	33-38		
L	ELBLR4*	ELBLT4*	ESBLR4*	ESBLT4*	55-65	39-44		
XL	ELBLR5*	ELBLT5*	ESBLR5*	ESBLT5*	60-70	45-52		



Katso
ohjevideot
[www.bit.ly/
easywrapvideot](http://www.bit.ly/easywrapvideot)

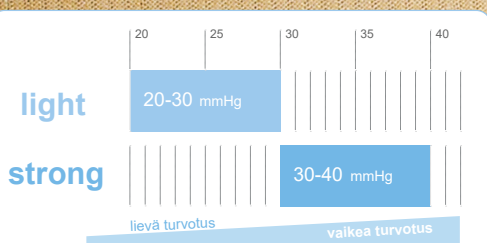

Easywrap reisi-polviosa HIEKKA


Koko	TUOTENUMEROT						MITAT				
	LIGHT			STRONG			g ympärysmitta	e ¹ ympärysmitta	e ¹ -g välinen pituus		
	Lyhyt	Normaali	Pitkä	Lyhyt	Normaali	Pitkä			Lyhyt	Normaali	Pitkä
XS	ELTS1	ELTR1*	ELTT1*	ESTS1*	ESTR1*	ESTT1*	60-70	47-52	16-20	20-24	25-30
S	ELTS2*	ELTR2*	ELTT2*	ESTS2*	ESTR2*	ESTT2*	65-75	53-59			
M	ELTS3*	ELTR3*	ELTT3	ESTS3*	ESTR3*	ESTT3*	70-80	60-66			
L	ELTS4*	ELTR4*	ELTT4*	ESTS4*	ESTR4*	ESTT4*	75-90	67-73			
XL	ELTS5*	ELTR5*	ELTT5*	ESTS5*	ESTR5*	ESTT5*	85-100	74-80			

Easywrap reisi-polviosa MUSTA

Koko	TUOTENUMEROT						MITAT				
	LIGHT			STRONG			g ympärysmitta	e ¹ ympärysmitta	e ¹ -g välinen pituus		
	Lyhyt	Normaali	Pitkä	Lyhyt	Normaali	Pitkä			Lyhyt	Normaali	Pitkä
XS	ELBTS1*	ELBTR1*	ELBTT1*	ESBTS1*	ESBTR1*	ESBTT1*	60-70	47-52	16-20	20-24	25-30
S	ELBTS2*	ELBTR2*	ELBTT2*	ESBTS2*	ESBTR2*	ESBTT2*	65-75	53-59			
M	ELBTS3*	ELBTR3*	ELBTT3*	ESBTS3*	ESBTR3*	ESBTT3*	70-80	60-66			
L	ELBTS4*	ELBTR4*	ELBTT4*	ESBTS4*	ESBTR4*	ESBTT4*	75-90	67-73			
XL	ELBTS5*	ELBTR5*	ELBTT5*	ESBTS5*	ESBTR5*	ESBTT5*	85-100	74-80			

Alaraajan ympärysmittaohje

- g Aivan nivusen alapuolelta
e¹ Reiden alaosa
d 2 sormen leveyttä polvitaipteen alapuolelta
c Pohkeen levein kohta
b Nilkan ympärysmitta
- a¹ Jalkaterän ympärysmitta
a Jalkapohjan pituusmitta pikkuvarmaan tyvestä kantapähän
b-d Välinen pituus säären takaa mitattuna
e1-g Välinen pituus säären takaa mitattuna

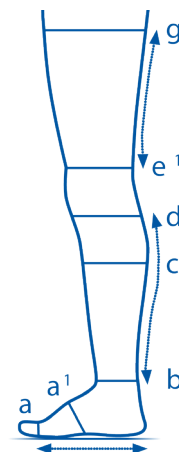


Easywrap käsivarsiosa HIEKKA (vain Light)

Koko	TUOTENUMEROT						MITAT					
	VASEN			OIKEA			c ympärysmitta	e ympärysmitta	g ympärysmitta	c-g välinen pituus		
	Lyhyt	Normaali	Pitkä	Lyhyt	Normaali	Pitkä				Lyhyt	Normaali	Pitkä
S	ELAS2L	ELAR2L*	ELAL2L*	ELAS2R	ELAR2R	ELAL2R*	14-18	20-27	22-31	40-44	44-48	48-52
M	ELAS3L	ELAR3L	ELAL3L*	ELAS3R	ELAR3R	ELAL3R	16-21	25-34	29-39			
L	ELAS4L	ELAR4L	ELAL4L*	ELAS4R	ELAR4R	ELAL4R	19-25	30-40	32-45			

Easywrap käsiosa HIEKKA (vain Light)

Koko	TUOTENUMEROT		MITAT	
	VASEN	OIKEA	a ympärysmitta	b ympärysmitta
XS	ELH1L	ELH1R	<18	<19
S	ELH2L	ELH2R	18-20	19-21
M	ELH3L	ELH3R	20-22	21-23
L	ELH4L	ELH4R	>22	>24

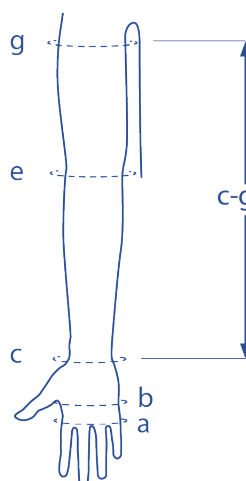

Yläraajan ympärysmittaohje

- g Kainalotaive
e Kyynärpäätäive
c Rannetaive
b Käsi, peukalotaiveen kohdalta
a Käsi, sormityvestä
c-g Käsivarren pituusmitta rannetaipteen kainalotaiveeseen

Microfine kompressiosormikas ja -varvikas

Erittäin ohut ja sileä materiaaliset kompressiotekstiilit

- Kompressio 20-36 mmHg
- Pituutta voi leikata ilman rispaantumista
- Molempipuolinen malli
- Miellyttävä käyttää, saumat ulkopuolella
- Pestävät (30°)
- Väri vaihtoehtoja: hiekka ja musta



Voidaan käyttää Easywrap-tekstiilien kanssa

Microfine sormikas

Koko	TUOTENUMEROT		MITAT	
	Musta	Hiekka	a ympärysmitta	b ympärysmitta
XXS	228B0*	228S0*	14-16	15-17
XS	228B1*	228S1*	16-18	17-19
S	228B2*	228S2	18-20	19-21
M	228B3*	228S3	20-22	21-23
L	228B4*	228S4	22-24	24-26

Microfine varvikas

Koko	TUOTENUMEROT		MITAT
	Musta	Hiekka	a ympärysmitta
XS	218B1*	218S1*	21-23
S	218B2*	218S2*	23-25
M	218B3	218S3*	25-27
L	218B4	218S4*	27-29
XL	218B5*	218S5*	29-31





Microfine-varvikas mittaohje

a Päkiän ympärysmitta

Microfine-sormikas mittaohje

a Ympärysmitta sormien tyvestä

b Ympärysmitta peukalon tyvestä

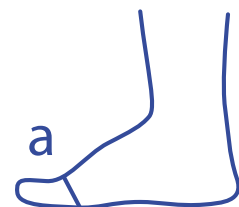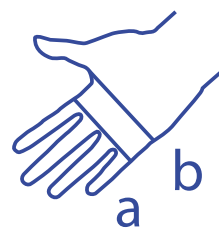

Easywrap Fusion Liner kompressiosukat Jalkateräalueen kompressioon



Easywrap Fusion Liner -sukat on tarkoitettu käytettäväksi Easywrap-jalkaosan sijaan ja yhdessä Easywrap-sääriosan kanssa. Kompressio sijaitsee sukissa ainoastaan jalkaterän ja nilkan alueella. Saatavilla kahdessa eri painepuristusluokassa: Light 20-30 mmHg ja Strong 30-40 mmHg.

- Huomaamaton ja ohut
- Nilkan kohdalla kompressiotaso laskee puoleen
- Avokärkinen sukka
- Erittäin joustava ilman kompressiota oleva sääriosa
- Antimikrobinen materiaali (sis. ionisoitua hopeaa)
- Pituus polven alapuolelle


Miellyttävä ja huomaamaton

Easywrap Fusion liner HIEKKA

Koko	TUOTENUMEROT		YMPÄRYSMITAT		
	LIGHT	STRONG	a ¹ jalkaterä	b nilkka	c Pohkeen levein kohta
XS	ELFD1	ESFD1	19-24	19-24	≤ 45
S	ELFD2	ESFD2	25-29	25-29	≤ 50
M	ELFD3	ESFD3	30-34	30-34	≤ 60
L	ELFD4	ESFD4	35-40	35-40	≤ 65
XL	ELFD5	ESFD5	41-46	41-46	≤ 70

Easywrap Fusion liner MUSTA

Koko	TUOTENUMEROT		YMPÄRYSMITAT		
	LIGHT	STRONG	a ¹ jalkaterä	b nilkka	c Pohkeen levein kohta
XS	ELBFD1	ESBFD1	19-24	19-24	≤ 45
S	ELBFD2	ESBFD2	25-29	25-29	≤ 50
M	ELBFD3	ESBFD3	30-34	30-34	≤ 60
L	ELBFD4	ESBFD4	35-40	35-40	≤ 65
XL	ELBFD5	ESBFD5	41-46	41-46	≤ 70

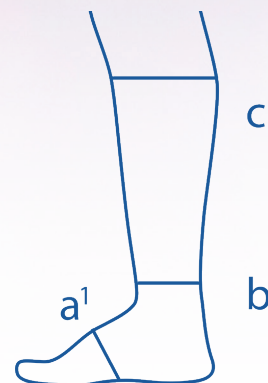


Ohje oikean tekstiilikoon ja mallin valitsemiseen

Olet nähnyt tuotemitta- ja tilaustietotaulukkomme ja ehkä ensimmäinen reaktiosi oli APUA! Älä hätäile, sillä alta löydät neljän kohdan ohjeen kuinka mitata ja valita oikea tekstiilin koko.

- 1. Mikä on kompressiotason tarve. Light vai Strong?**
20-30 mmHG, eli Light-malli vai 30-40 mmHG, eli Strong-malli.
Esim. säärihaavapotilaille valitaan yleensä Light-malli.

- 2. Mitkä ovat potilaan mitat**
Ota mitat ohjeistuksen mukaan ja katso taulukosta niitä vastaava rivi

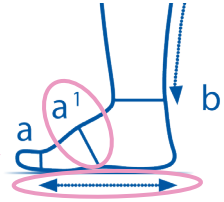

Koko	TUOTENUMEROT				MITAT		
	LIGHT		STRONG		a ¹ ympärysmitta	a jalkapohjan pituus	
	Normaali	Pitkä	Normaali	Pitkä		Normaali	Pitkä
XS	ELFR1	ELFL1	ESFR1*	ESFL1*	22-24	14,5-16,5	16,5-18,5
S	ELFR2	ELFL2	ESFR2*	ESFL2*	25-27	16-18	18-20
M	ELFR3	ELFL3	ESFR3*	ESFL3*	28-30	17,5-19,5	19,5-21,5
L	ELFR4	ELFL4	ESFR4*	ESFL4*	31-34	19-21	21-23
XL	ELFR5	ELFL5*	ESFR5*	ESFL5*	35-40	21-23	23-25

- 3. Valitse malli: lyhyt, normaali tai pitkä**
Lyhyt malli saatavilla vain reisi-polvitekstiilistä ja käsivarsitekstiilistä

- 4. Valitse kompressiota, mittoja ja mallia vastaava tuotenumero**
Tässä tapauksessa kun valitaan Light-kompressio, normaalipituinen malli ja otetut mitat antavat tulokseksi niitä vastaavan M-koon.

HUOM! Jos oikeaa kokoa ei löydy taulukosta, asiakkaalle tulee tilata mittatilaus-malli.
Kysy lisää alueesi edustajalta tai osta yhteyttä asiakaspalveluumme www.steripolar.fi/yhteystiedot



kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015