



Ominaisuudet


- Stressi-inkontinenssin hoitoon.
- Rengas kohottaa virtsaputkea ohjaten virtsan virtsarakkoon ylempää.
- Renkaan paksunnos ehkäisee virtsaputken ylemmän osan avautumisen stressin aikana.
- Gynekologi arvioi renkaan käyttöajan potilaan yksilöllisten ominaisuuksien ja estrogeenistatuksen mukaan
- Potilas voi asettaa renkaan itse, mahdollisesti päivittäin, kun on saanut ohjauksen sen oikeaoppiseen käyttöön

Käyttö

- Rengas on tehty muotoillusta jousesta ja päällystetty silikonilla
- Yleisimmin käytetyt koot: 65 mm–80 mm (saatavilla tarvittaessa 12 kokoa 45 mm–100 mm).
- Käyttöikä 1 v
- **HUOM.** Saattaa sisältää metallijousen. Uretrarengas poistettava ennen MRI-tutkimusta!

Paikoilleen asettaminen

- Kostuta rengas vedellä
 - Nosta jalka jakkaralle tai sängynreunalle
 - Purista rengas kasaan kahden sormen väliin
- Aseta rengas puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen niin, että paksunnos jää eteen

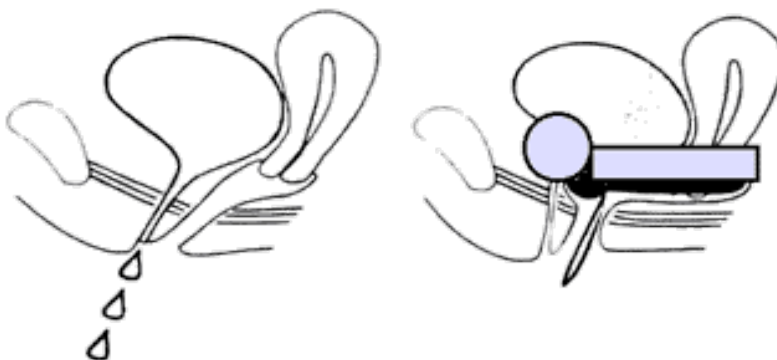

Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään juoksevalla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

kun hoitotulokset ratkaisevat